

Waga Mi z analizatorem pomiaru składu ciała 2

Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem

Wkładanie baterii



Pobieranie aplikacji

Zeskanuj kod QR, a następnie pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji „Mi Fit”, lub wyszukaj ją w Google Play, App Store lub innych sklepach z aplikacjami.



Parowanie wagi przez Bluetooth

Aby sparować urządzenie z aplikacją Mi Fit, zaloguj się do niej za pomocą swojego loginu Mi, następnie nawiąż połączenie Bluetooth pomiędzy wagą a kontem i wprowadź swoje dane osobowe zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po sparowaniu wagi możesz sprawdzić historię ważenia i informacje o masie ciała używając aplikacji Mi Fit oraz aplikacji Mi Home/Xiaomi Home*. W Europie (z wyjątkiem Rosji) ta aplikacja nazywa się Xiaomi Home. Nazwa aplikacji wyświetlana na urządzeniu powinna być traktowana jako domyślna. Dane osobowe są wykorzystywane do analizy masy ciała. Aby zapewnić dokładność wyników, prosimy o podanie dokładnych danych osobowych.

Wybór jednostki wagi

Waga domyślnie wyświetla obliczenia w kilogramach (kg). Możesz zmienić jednostkę wagi za pomocą ustawień urządzenia w aplikacji Mi Fit. Waga może wyświetlać wagę w kilogramach (kg) i funtach (lb).

Wybór jednostki wagi

Waga domyślnie wyświetla obliczenia w kilogramach (kg). Możesz zmienić jednostkę wagi za pomocą ustawień urządzenia w aplikacji Mi Fit. Waga może wyświetlać wagę w kilogramach (kg) i funtach (lb).

Środki ostrożności

1. Aby zapobiec poślizgnięciu się, nie należy umieszczać wagi na śliskim podłożu ani używać jej, gdy stopy lub waga są mokre.
2. Za każdym razem należy stać na środku wagi, aby zapobiec jej przypadkowemu przechyleniu się podczas użycia.
3. Wagę należy stosować wyłącznie w suchym środowisku i nie zanurzać jej w wodzie.
4. Aby wyczyścić wagę, należy wytrzeć jej powierzchnię wilgotną szmatką i łagodnym detergentem. Nie należy stosować żadnych rozpuszczalników organicznych ani innych substancji chemicznych.
5. Po wyczerpaniu baterii należy je natychmiast wymienić, aby uniknąć potencjalnego wycieku i korozji.
6. Nie zaleca się używania tej wagi przez osoby z rozrusznikiem serca lub innymi wszczepionymi urządzeniami medycznymi. Dokładność danych dotyczących masy ciała może się różnić w przypadku stosowania ich przez zawodowych sportowców, kobiety w ciąży i inne osoby ze specjalnymi uwarunkowaniami.
7. Możesz użyć aplikacji Mi Fit, aby skorzystać z funkcji testu balansu – stania na jednej nodze z zamkniętymi oczami (One-foot-stand with Eyes Closed Measurement). Kiedy utracisz równowagę, upewnij się, że po otworzeniu oczu stoisz stabilnie na podłożu, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu się. Wszyscy, w tym dzieci, osoby starsze, matki w ciąży i inne osoby z problemami na tle fizycznym lub z równowagą, powinni korzystać z tej funkcji z rozwagą.

Informacje dot. unieszkodliwiania i recyklingu



Symbol ten wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z odpadami komunalnymi. Należy pamiętać o przekazaniu urządzenia do bezpiecznego dla środowiska recyklingu zostawiając go we właściwym punkcie selektywnej zbiórki odpadów w celu ponownego wykorzystania materiałów.

Informacja WEEE



Niniejszym Xiaomi Communications Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu R03 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Ważenie i pomiary zawartości tłuszczu

W pierwszej kolejności, połóż wagę na twardej, płaskiej podłodze. Wejdź bosą na wagę, tak jak pokazano na rysunku. Upewnij się, że powierzchnia stóp jest odpowiednio połączona z czterema metalowymi elektrodami na wadze. Po zakończeniu pomiaru, waga rozpocznie analizę masy ciała. Proces zostanie zakończony, gdy pasek stanu poniżej wskaźnika masy zacznie migać. Wyniki analizy możesz zobaczyć na telefonie.

Dane dotyczące masy ciała podane przez wagę mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być uznawane za poradę lekarską.




Ważenie przedmiotów


W pierwszej kolejności, połóż wagę na twardej, płaskiej powierzchni. Następnie naciśnij wagę, aby ją włączyć. Poczekaj, aż pojawi się napis „0,00” i umieść przedmiot na wadze. Przesuwanie lub stukanie wagi może mieć wpływ na dokładność. Jeśli waga została przesunięta, ponownie zważ element, aby upewnić się, że pomiar jest dokładny.

Ważenie przedmiotów

Podczas ważenia, migająca litera „L” oznacza niski poziom naładowania baterii. W takim wypadku jak najszybciej wymień baterie.

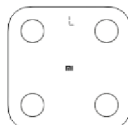

Podczas ważenia, migający napis „OL” oznacza, że waga jest przeciążona powyżej maksymalnej nośności wynoszącej 150 kg.

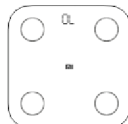

Dane techniczne

Wymiary: 300 mm x 300 mm x 25 mm
Waga: 1,7 kg
Zakres pomiaru: 100 g - 150 kg Jednostki pomiaru masy: kg/lb
Przyrost: 0,1 kg/lb
Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0 Temperatura robocza: 0°C ~ 40°C Częstotliwość: 2402 ~ 2480 MHz
Maks. Moc wyjściowa: 0 dBm Zasilanie: cztery baterie AAA 1,5 V
Materiał obudowy: szkło hartowane, tworzywo techniczne ABS
Urządzenie kompatybilne z: Android 4.4 lub iOS 9.0 (iPhone 5S i nowszymi wersjami) i nowszymi wersjami, Bluetooth 4.0 i nowszymi wersjami.

Waga Mi z analizatorem pomiaru składu ciała 2

Model: XMTZC05HM
Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Producent: Anhui Huami Technology Co., Ltd. (firma w ekosystemie Mi)
Adres: Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base, No. 800 Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, China
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.mi.com

Importer i dystrybutor: CIFROTECH

CIFROTECH POLSKA Sp. z o.o.
Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska

Wybór jednostki wagi

Waga domyślnie wyświetla obliczenia w kilogramach (kg). Możesz zmienić jednostkę wagi za pomocą ustawień urządzenia w aplikacji Mi Fit. Waga może wyświetlać wagę w kilogramach (kg) i funtach (lb).

Środki ostrożności

1. Aby zapobiec poślizgnięciu się, nie należy umieszczać wagi na śliskim podłożu ani używać jej, gdy stopy lub waga są mokre.
2. Za każdym razem należy stać na środku wagi, aby zapobiec jej przypadkowemu przechyleniu się podczas użycia.
3. Wagę należy stosować wyłącznie w suchym środowisku i nie zanurzać jej w wodzie.
4. Aby wyczyścić wagę, należy wytrzeć jej powierzchnię wilgotną szmatką i łagodnym detergentem. Nie należy stosować żadnych rozpuszczalników organicznych ani innych substancji chemicznych.
5. Po wyczerpaniu baterii należy je natychmiast wymienić, aby uniknąć potencjalnego wycieku i korozji.
6. Nie zaleca się używania tej wagi przez osoby z rozrusznikiem serca lub innymi wszczepionymi urządzeniami medycznymi. Dokładność danych dotyczących masy ciała może się różnić w przypadku stosowania ich przez zawodowych sportowców, kobiety w ciąży i inne osoby ze specjalnymi uwarunkowaniami.
7. Możesz użyć aplikacji Mi Fit, aby skorzystać z funkcji testu balansu – stania na jednej nodze z zamkniętymi oczami (One-foot-stand with Eyes Closed Measurement). Kiedy utracisz równowagę, upewnij się, że po otworzeniu oczu stoisz stabilnie na podłożu, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu się. Wszyscy, w tym dzieci, osoby starsze, matki w ciąży i inne osoby z problemami na tle fizycznym lub z równowagą, powinni korzystać z tej funkcji z rozwagą.

Informacje dot. nieszkodliwienia i recyklingu



Symbol ten wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z odpadami komunalnymi. Należy pamiętać o przekazaniu urządzenia do bezpiecznego dla środowiska recyklingu zostawiając go we właściwym punkcie selektywnej zbiórki odpadów w celu ponownego wykorzystania materiałów.

Informacja WEEE



Niniejszym Xiaomi Communications Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu R03 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Dane techniczne

Wymiary: 300 mm x 300 mm x 25 mm
Waga: 1,7 kg
Zakres pomiaru: 100 g - 150 kg. Jednostki pomiaru masy: kg/lb
Przyrost: 0,1 kg/lb
Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0 Temperatura robocza: 0°C ~ 40°C Częstotliwość: 2402 – 2480 MHz
Maks. Moc wyjściowa: 0 dBm Zasilanie: cztery baterie AAA 1,5 V
Materiał obudowy: szkło hartowane, tworzywo techniczne ABS
Urządzenie kompatybilne z: Android 4.4 lub iOS 9.0 (iPhone 5S i nowszymi wersjami) i nowszymi wersjami, Bluetooth 4.0 i nowszymi wersjami.

Waga Mi z analizatorem pomiaru składu ciała 2

Model: XMTZC05HM
Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Producent: Anhui Huami Technology Co., Ltd. (firma w ekosystemie Mi)
Adres: Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base, No. 800 Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, China
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.mi.com

Importer i dystrybutor:  **CIFROTECH**

CIFROTECH POLSKA Sp. z o.o.
Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska

Łączenie z aplikacją Mi Home/Xiaomi HomeProdukt

Produkt współdziała z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home*. Steruj swoim urządzeniem i powiąż je z innymi inteligentnymi urządzeniami w mieszkaniu dzięki aplikacji Mi Home/Xiaomi Home. Aby pobrać i zainstalować aplikację, należy zeskanować kod QR.



Jeżeli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. W przeciwnym razie w sklepie z aplikacjami należy wyszukać aplikacji Mi Home/Xiaomi Home, a następnie ją pobrać i zainstalować. Po otwarciu aplikacji Mi Home/Xiaomi Home, należy dotknąć ikony „+” w prawym, górnym rogu i następnie postępować zgodnie ze wskazówkami, aby dodać urządzenie.* Aplikacja oznacza aplikację Xiaomi Home w Europie (z wyjątkiem Rosji). Nazwę aplikacji wyświetlaną na urządzeniu należy traktować jako domyślną.

Inteligentne sterowanie Apple HomeKit Smart Control

1. Otwórz aplikację Home na urządzeniu iPhone lub iPad.
 2. Wybierz „Add Accessories” (Dodaj akcesoria) i postępuj zgodnie ze wskazówkami aplikacji, aby zeskanować kod QR umieszczony na podstawie produktu lub wprowadzić 8-cyfrowy kod konfiguracyjny znajdujący się powyżej kodu QR, aby uzyskać dostęp do aplikacji Apple Home.* Upewnij się, że dostępna jest sieć Wi-Fi z dostępem do Internetu (produkt nie obsługuje sieci 5G).
- Aby sterować urządzeniem kompatybilnym z aplikacją HomeKit, zaleca się korzystanie z wersji iOS 9.0 lub nowszej. Kod konfiguracyjny HomeKit znajduje się na podstawie urządzenia. Nie należy dopuścić do jego utraty. Po przywróceniu ustawień fabrycznych konieczne będzie ponowne wprowadzenie kodu konfiguracyjnego HomeKit. iPad i iPhone są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Połączenie lampki z Asystentem Google

Dodaj usługę Mi Home/Xiaomi Home do aplikacji Asystenta Google, aby sterować urządzeniem połączonym z Mi Home/Xiaomi Home za pomocą Asystenta Google.


1. Wybierz przycisk aplikacji Asystent Google, wyszukaj „Mi Home/Xiaomi Home” wybierz opcję „Link” (Połącz) i zarejestruj się za pomocą konta Xiaomi.
2. Wybierz przycisk w „Settings” (Ustawienia) > „Home control” (Sterowanie domem), aby dodać urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Po połączeniu kont możliwe będzie sterowanie lampką poprzez aplikację Asystenta Google

Lampka biurkowa LED 1S Mi – Mi LED Desk Lamp 1S



Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem

Opis produktu

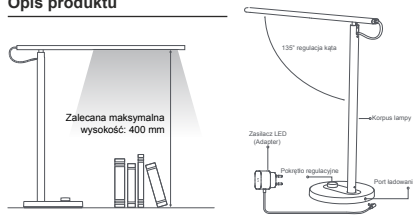

Dziękujemy za wybór lampki biurkowej LED 1S Mi. Lampka jest wyposażona w światło LED o wysokiej wydajności i posiada profesjonalny układ optyczny wykorzystujący algorytm mieszania światła naturalnego w celu zapewnienia jednolitego oświetlenia. Lampka jest przeznaczona do stosowania w pracowniach, sypialniach oraz innych pomieszczeniach wewnętrznych. W normalnych warunkach użytkowania lampkę należy ustawić tak, aby klosz (zaznaczony na rysunku literami A i B) był ustawiony równolegle do blatu biurka. Gdy powierzchnia emitująca światło jest ustawiona w poziomie, pionowa odległość pomiędzy nią a blatem wynosi 400 mm.

Wybór jednostki wagi



- Wciśnij pokrętko jeden raz, aby włączyć lub wyłączyć lampę
- Obróć pokrętko, aby ustawić jasność lampy.
- Przytrzymaj pokrętko w pozycji wciśniętej i obróć je, aby ustawić kolor światła

Połączenie lampki z Amazon Alexa

Dodaj umiejętność Mi Home/Xiaomi Home do aplikacji Amazon Alexa, aby sterować urządzeniami połączonymi z Mi Home/Xiaomi Home za pomocą Amazon Alexa.

1. Wybierz przycisk  w aplikacji Amazon Alexa, następnie kliknij w pole „Skills & Games” (Umiejętności i gry), wyszukaj „MiHome/Xiaomi Home”, wybierz odpowiednią umiejętność i wybierz „Enable” (Włącz).


Następnie zaloguj się za pomocą konta Xiaomi.

2. Po pomyślnym połączeniu kont, wybierz opcję „DISCOVER DEVICES” (SZUKAJ URZĄDZEŃ), aby dodać urządzenie i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Po połączeniu kont można sterować Lampką za pomocą aplikacji Amazon Alexa.

Uwaga: Nazwa (Mi Home lub Xiaomi Home) może się różnić w zależności od wybranego języka lub regionu.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przycisk reset znajduje się w dolnej części podstawy lampki. Gdy lampka jest podłączona do zasilania należy włożyć do otworu prosty, cienki przedmiot i przytrzymać przez 5 sekund. Gdy światło lampki zacznie miarowo zapalać się i gasnąć, należy wyjąć przedmiot. Po ustaniu powyższego zjawiska przywrócenie ustawień fabrycznych jest zakończone.

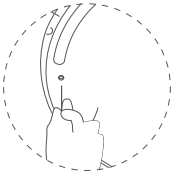

Dane techniczne

Model: MJTD01SYL
Temperatura robocza: -10°C do 35°C
Wilgotność robocza: 0-85% wilgotność względna
Żywotność: ok. 25000 h
Współczynnik oddania barw (CRI): Ra90
Współczynnik mocy: 0.5
Wejście lampki nocnej: 12V 0.8A
Znamionowa moc wejściowa: 9 W (lampka + zasilacz LED)
Wartości znamionowe na wejściu: 220-240 V~50/60 Hz 0,45 A
Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Kompatybilność z: Android 4.4 lub iOS 9.0 i nowsze
Częstotliwość robocza: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)
Maksymalna moc wyjściowa: 17,91 dBm (Wi-Fi) 5,76 dBm (BT)

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Wyprodukowano przez: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. (firma w ekosystemie Mi)
Adres: F10-B4, Bldg. B, International Innovation Park, 1# Keyuanweiyi Rd., Laoshan District, Qingdao, 266101, Shandong, China. Więcej informacji znajduje się na stronie www.mi.com

Właściwości produktu

 Regulacja temperatury barw	 Regulacja jasności	 Bez migotania	 Niska zawartość światła niebieskiego	 Wysoki współczynnik oddawania barw
 Planowane włączanie / wyłączanie	 Możliwość złożenia	 135° regulacja kąta	 Tryb skupienia	 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
 Tryb czytania	 Tryb komputerowy	 Tryb dziecięcy	 Opóźnienie wyłączenia	 Sterowanie HomeKit

Uwaga

Urządzenie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach w temperaturze otoczenia wynoszącej 35°C. Należy zastosować odpowiednie źródła zasilania znajdujące się w pomieszczeniu. W przypadku wątpliwości należy się skonsultować z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie umieszczać lampki na pochylej powierzchni. Tylko do użytku domowego. Oprawa oświetleniowa klasy III. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta lub wykwalifikowanego serwisanta, aby uniknąć zagrożenia dla bezpieczeństwa. Źródła światła, których użytkownik nie może wymienić: „Źródło światła zawarte w niniejszej oprawie świetlnej może być wymienione tylko przez producenta lub jego agenta serwisowego, bądź inną osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.” Nie należy rozkręcać produktu. Dioda emitująca światło może uszkodzić wzrok.

Deklaracja zgodności UE

 Symbol ten wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z odpadami komunalnymi. Należy pamiętać o przekazaniu urządzenia do bezpiecznego dla środowiska recyklingu zostawiając go we właściwym punkcie selektywnej zbiórki odpadów w celu ponownego wykorzystania materiałów.

Informacja WEEE

 UE Niniejszym Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu MJTD01SYL jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.mi.com/en/service/support/declaration.html

Importer i dystrybutor:  **CIFROTECH**
CIFROTECH POLSKA Sp. z o.o.
Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska

Karta Gwarancyjna

Numer Seryjny Produktu:

IMEI

Data sprzedaży

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Serwis:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
ul. Puławska 40A
05-500 Piaseczno
tel. 22 726 38 10
info@ccsonline.pl
www.ccsonline.pl

S.B.E. Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 34
05-500 Piaseczno
tel. 22 716 43 33
www.sbe-online.pl

Aktualna lista autoryzowanych serwisów znajduje się pod adresem:
www.mi.com/pl

Dystrybutor:



CIFROTECH

Cifrotech Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

Warunki Gwarancji

1. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2. Firma Cifrotech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, zwana dalej Gwarantem, gwarantuje poprawną pracę produktu w okresie:

- 24 miesiące dla urządzenia i dla wbudowanej baterii
- 6 miesięcy dla niewbudowanej baterii
- 24 miesiące na akcesoria techniczne, które są dostarczane w opakowaniu detalicznym z urządzeniem, liczonych od daty sprzedaży na podstawie paragonu/faktury oficjalnego partnera.

3. Ujawnione w okresie gwarancji wady i uszkodzenia Produktu będą bezpłatnie usuwane przez Serwis w możliwie krótkim terminie. Serwis dołoży starań, aby czas usunięcia usterki nie był dłuższy niż 10 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do serwisu.

4. Warunkiem skorzystania z naprawy jest dostarczenie uszkodzonego Produktu w opakowaniu ochronnym do Centrum Serwisowego i przedstawienie kopii dokumentu sprzedaży/wydania z wpisanym numerem seryjnym oraz IMEI produktu.

5. W celu złożenia reklamacji towaru prosimy o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu (jeżeli to możliwe) wraz ze wszystkimi oryginalnymi akcesoriami dołączonymi do produktu.

6. Karta gwarancyjna jest nieważna, jeżeli nie jest w niej wpisana data zakupu potwierdzona pieczęcią punktu sprzedaży, czytelnym podpisem sprzedawcy oraz numerem SN/IMEI urządzenia. Karta gwarancyjna jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu (np. faktura lub paragon).

7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z:

- uszkodzeń produktu powstałych na skutek normalnego, naturalnego zużycia, np. zatarcia napisów, zarysowań itp., które powstały w trakcie jego użytkowania i eksploatacji;
- uszkodzeń powstałych na skutek użycia akcesoriów, przedmiotów obcych, upadku, użycia siły (np. uderzenia);
- wad i uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego przechowywania, transportu, niezgodnego z instrukcją obsługi;
- wad powstałych na skutek dostania się wody, brudu, ciał obcych, nieprzestrzegania zasad eksploatacji produktu;
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych oraz wszelkich usterek produktu powstałych na skutek tych uszkodzeń, korozji, rdzy, stosowania niewłaściwego napięcia;
- skutków samodzielnej lub zewnętrznej, innej niż autoryzowany serwis naprawy, demontażu, modyfikacji produktu (np. próba wyjęcia akumulatora);
- szkody spowodowane zdarzeniami losowymi, siłą wyższą (np. pożar, powódź, wojna itp.);
- wad fabrycznych produktu i oprogramowania;
- konsekwencji modyfikacji lub wymiany oryginalnego systemu operacyjnego, oprogramowania (na przykład zmiana praw użytkownika lub instalacja niestandardowej pamięci ROM);
- produktów z brakującym lub zatartym numerem seryjnym lub IMEI

8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę i odtworzenie danych zawartych w Produkcie. Gwarancja nie daje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków, związanych z uszkodzeniem Produktu, oraz strat związanych z utratą danych.

Roszczenia gwarancyjne kupującego są wykluczone w przypadku, gdy nie dostarczy on kopii dokumentu potwierdzającego zakup (np. paragonu) zawierającego podaną nazwę produktu, model/typ produktu i datę zakupu.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.